

# 高压灭菌器“MICRO 8”, “MED 12”和“MED 20”

压力调节器恒温器: 1和2 bar. 温度: 121 °C和134 °C

立式台式型号“MICRO 8”容量: 8 L “MED 12” 容量: 12 L

立式站立式型号“MED 20”容量: 20 L

## 经济之选. 半自动化

### 安全保护:

安全阀: 防止高压釜内的压力超过最大设定极限

安全压力: 如果超过压力设定极限, 将断开加热器电源

安全恒温器: 在水箱过热或缺水的情况下, 断开加热

由模制热塑性塑料制成的隔热盖

### 特点

AISI 304不锈钢外壳和顶部

不锈钢腔室和盖子易于打开

INCOLOY 特殊不锈钢加热元件, 使用寿命长, 耐腐蚀, 耐高温

启动时手动排气(“MICRO 8”型号)

自动空气吹扫(“MED 12”和“MED 20”型号)

防止盖子打开的安全装置

启动主开关



### 后部

电源

两个保险丝托架

安全恒温器




### 侧边部分

排水口

蒸汽和排水选择阀

### 控制面板

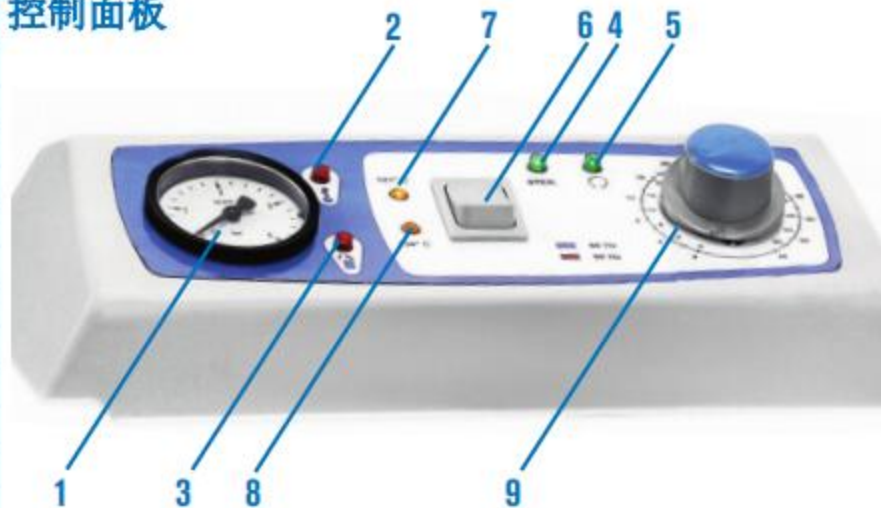

1. 压力计
2. 过温报警指示灯
3. 门开启指示灯
4. 灭菌阶段指示灯
5. 灭菌周期结束指示灯
6. 温度选择: 121°C / 134°C
7. 温度设置在121°C的指示灯
8. 温度设置在134°C的指示灯
9. 时间设置: 0 — 60'



# 高压灭菌器“MED 12”

台式型号

特点: 见第56页



## 型号

Part No.	Capacity litres	Ø	Height (usable) cm	Height/Width/Depth (exterior) cm			Power W	Weight Kg
<b>4001756</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>1800</b>	<b>18</b>

配有一个不锈钢网篮, 直径22x24cm高. Part no. 1004772