




# 微处理器控制的离心机“Centromix BLT”, “Mixtasel BLT”, “Centronic BLT”和“Centrofriger BLT”

## 特点

### 坚固的全金属结构:

- 外壳由DUR-Al合金制成
- 内部碗和顶板均为不锈钢
- 外壳内部的钢制安全室

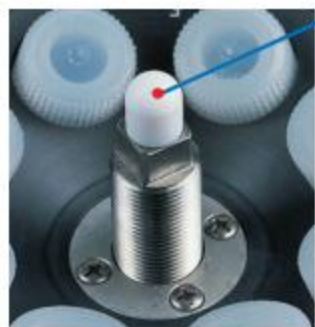

**旋转器识别头部(仅限型号“Centronic BLT”和“Centrofriger BLT”)** 当离心机盖关闭时, 旋转器会确认其功能的所有数据. 这防止了在使用前在程序中使用错误的旋转器或超过旋转器运行参数的风险. 该系统的优点是, 我们可以在不改变离心机型号的情况下增加额外的转子

**电子电路, 微处理器数字控制的所有参数和功能:** 速度, 加速, 制动, RCF, 温度, 计时器, 10组程序存储, 旋转器的自动识别和报警系统


### 免维护感应式驱动电机

低噪声等级50-60 dBa

**旋转器, 桶和适配器**用不可更改的激光雕刻编号标识, 空气循环系统, 为了限制离心分离机内部温度的过度升高, 所有在离心分离机内部循环的空气都从后面排出, 不再循环, 这意味着离心机内部温度将保持低且恒定

**密封压缩机, 安装在防振支架上, 离心室周围有循环蒸发器** (仅适用于冷藏型离心机)

## 控制面板 TFT 触摸屏

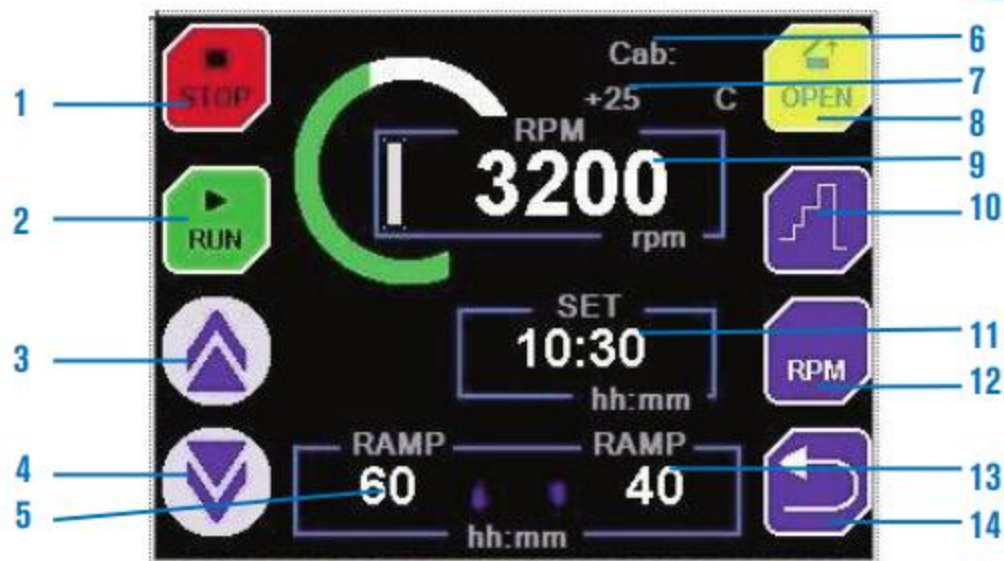

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. 进程停止按键          | 8. 开门按键            |
| 2. 进程开始按键          | 9. RPM或RCF实时读数     |
| 3. 增加参数值按键         | 10. 顺序操作           |
| 4. 减少参数值按键         | 11. 进程的时间设置        |
| 5. 预设加速梯度          | 12. 改变RPM / RCF的按键 |
| 6. 正在使用的旋转器型号      | 13. 制动梯度的程序设定      |
| 7. 读取实时温度 (仅限冷藏型号) | 14. 返回按键           |





# 离心机“MixtaseL-BLT”

免维护感应式驱动电机

## 多功能, 带旋转器和可互换适配器

控制面板特点(见第116页)



DUR-AL合金外壳, ABS塑料涂层前面板, AISI 304不锈钢钵体

### 型号

Part No.	Max. Volume ml	Max. Number of tubes	Height / Width / Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
<b>7002576</b>	<b>400</b>	<b>4 x 100 ml</b>	<b>34 41 54</b>	<b>210</b>	<b>22</b>

### 配件

摆动旋转器, 带有可互换的密封桶和适配器, 每个都带有标识码. 可高压灭菌



Part No. head	Rotor type	Bucket open	Sealed bucket	Part No. adapter	Total max. Volume (4 adapters)	Bucket/Adapter capacity	Ø x Length mm	Max. R.p.m.	Max. R.c.f. (xg)
	Swing out	<b>7000731</b>	<b>7000732</b>	<b>7000734</b>	200 ml	1 x 50 ml	34 x 100	4200	4137
	Swing out	<b>7000731</b>	<b>7000732</b>	<b>7000735</b>	200 ml	2 x 25 ml	24 x 100	4200	4137
	Swing out	<b>7000731</b>	<b>7000732</b>	<b>7000736</b>	420 ml	7 x 15 ml and VAC*	16.5 x 100	4200	4137
<b>7009079</b>	Swing out	<b>7000731</b>	<b>7000732</b>	<b>7001647</b>	240 ml	6 x 10 ml	17 x 110	4200	4137
	Swing out	<b>7000731</b>	<b>7000732</b>	<b>7000737</b>	336 ml	12 x 7 ml	12 x 100	4200	4137
	Swing out	<b>7000731</b>	<b>7000732</b>	<b>7000738</b>	240 ml	12 x 5 ml	12.5 x 75	4200	4137
	Swing out	<b>7000731</b>	<b>7000732</b>	<b>7001648</b>	140 ml	7 x 5 ml and VAC*	13 x 75	4200	4137
	Swing out	<b>7000731</b>	<b>7000732</b>	<b>7000739</b>	144 ml	12 x 3 ml	11 x 100	4200	4137
	Swing out	<b>7000731</b>	<b>7000732</b>	<b>7000740</b>	-	undrilled	-	4200	4137
<b>7000612</b>	Swing out	-	-	-	-	4 x 96 microtiter	-	4200	1719

\*VAC:带塞子的血液管.

\*\* 桶 Part No. 7000731可容纳1 x 200 ml带盖polypropylene聚丙烯瓶, 无需适配器.

注:除非另有说明, 否则所有桶和适配器都不带试管, 试管和配件见第132页